

Podne Centrifuge




PODNE CENTRIFUGE

ROTANTA 460 Robotic

ROTIXA 50 S/50 RS

ROTO SILENTA 630 RS

Rotanta 460 Robotic

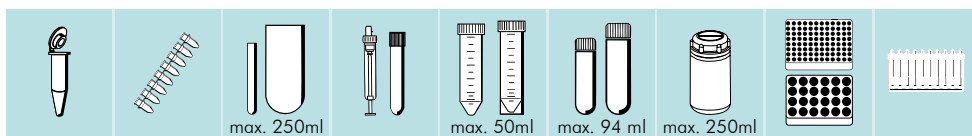


Brža – automatska

ROTANTA 460 ROBOTIC modeli su centrifuge sa hlađenjem i PC kontrolom i podešavanjem rotora. Idealne su za upotrebu u slučajevima kada uzorak može biti automatski obrađen. Naročito u genetskom i farmaceutskom istraživanju, ove centrifuge mogu značajno da doprinesu racionalizaciji rutinskih zadataka.



TEHNOLOGIJA

ROTANTA 460 ROBOTIC

Podna centrifuga, bez rotora	hlađenje			
	zadnji izvod	prednji izvod	zadnji izvod	prednji izvod
Napajanje ¹⁾	230–240 V 1 ~		110–120 V 1 ~	
Frekvencija	50–60 Hz		50–60 Hz	
Potrošnja	max. 1,800 VA			
Emisija, Imunitet	EN / IEC 61326-1, klasa B		FCC klasa A	
	EN 61000-6-2			
 Max. kapacitet ²⁾	4 x 250 ml			
Max. RPM (brzina) ²⁾	6,200 min ⁻¹			
Max. RCF ²⁾	6,446			
Dozvoljena gustina	1.2 kg/dm ³			
Dimenzije (HxWxD)	684x554x697 mm			
Težina	159 kg			
Kontrola temp., beskrajno promenljiv	od -20 do +40 °C			
Cat. No.	5680	5680-10	5680-01	5680-11

¹⁾ Ostale voltaže na zahtev.

²⁾ U osnovi, ROTANTA 46 RSC ROBOTIC prima max. kapacitet od 4 x 750 ml i proizvodi max. RCF od 10,062. Međutim, ove vrednosti se dostižu sa dodatnom opremom, koja nije najpogodnija za robotsku primenu. Detalji na zahtev.

Standardni dodaci



Swing-out (krstasti) rotor, 4-mesta
prikaz sa nosačima 5628-R
 $n = 4,600 \text{ min}^{-1}$, max. RCF = 4,637

Cat. No. 5624 (bez nosača)



Swing-out (krstasti) rotor, 2-mesta
prikaz sa nosačima 4623-R
 $n = 6,200 \text{ min}^{-1}$, max. RCF = 6,446

Cat. No. 4620 (bez nosača)



Swing-out (krstasti) rotor, 4-mesta
prikaz sa nosačima 4465-R
 $n = 4,500 \text{ min}^{-1}$, max. RCF = 4,302

Cat. No. 4444 (bez nosača)

Posebni dodaci na zahtev kupaca

ROTANTA 460 ROBOTIC centrifuga može biti ugrađena u bilo koju radnu stanicu. Kao dodatak standardnoj dodatnoj opremi, proizvodimo i specijalne nosače i umetke koji su izrađeni u skladu sa Vašim zahtevima.

Molimo Vas da nas obavestite o Vašim zahtevima!

Primeri posebnih dodataka




Removal aid in the 4623-R carrier




Insert in the 4465-R carrier

Pristup robotske ručice sa zadnje strane

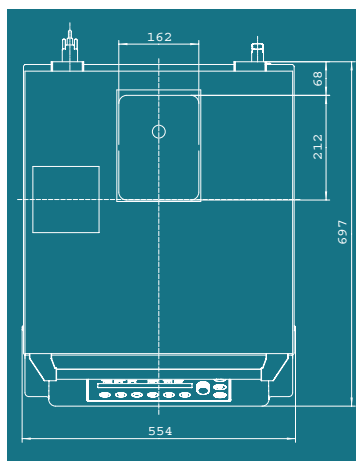

Cat. Nos. 4817/4817-01

Pristup robotske ručice sa prednje strane

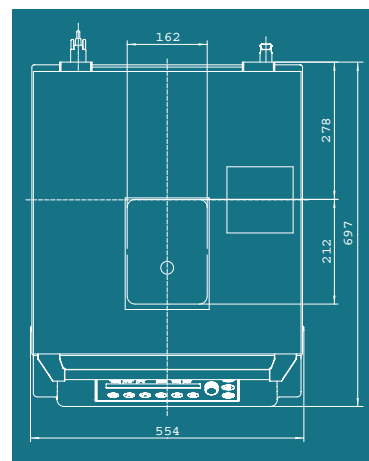

Cat. Nos. 4817-10/4817-11

Klizni otvor u poklopcu otvara se pre i posle svakog ciklusa centrifugiranja, koji omogućava punjenje i pražnjenje rotora pomoću robotske ručice. Kao standardna oprema, dostupne su dve verzije poklopca, u zavisnosti od toga da li je pristup robotizovane ručice sa prednje ili zadnje strane poklopca. Pomoću crteža sa prikazanim dimenzijama, lokacija centrifuge može biti precizno definisana pre isporuke.